

連續生成型電解水素水整水器

TRIM ION Well



酸性水



淨水



水素水

●
TRIM ION
Well



Wellと生きていく

水は、未来の自分

PFOS・PFOAの除去だけでなく

もっと美しく、ずっと健やかに


TRIM ION
Well






いつもの水道水をワンランク上の水に

電解水素水整水器がWellな理由

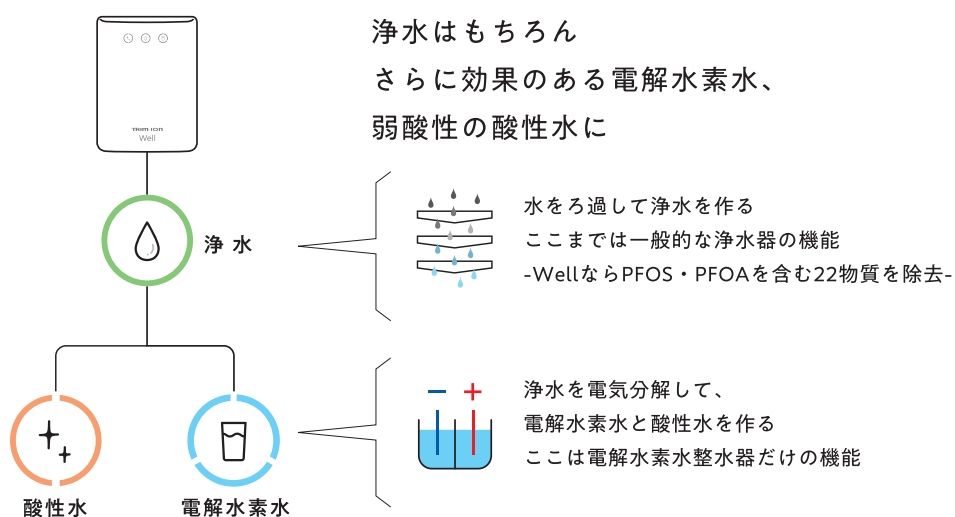

日本トリムの電解水素水整水器は 家庭用管理医療機器^{*1}

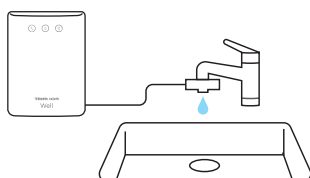

ISO13485^{*2}を取得した国内自社工場で製造された整水器。
そこから生成される水は、毎日の水習慣を支えます。

医療機器製造販売認証番号: 307AGBZX00027000


^{*1} 家庭用管理医療機器とは専ら家庭において使用される管理医療機器であって厚生労働大臣の指定するもの以外の管理医療機器（特定保守管理医療機器を除く）です。

^{*2} 医療機器の品質標準規格



電解水素水とは

電解水素水

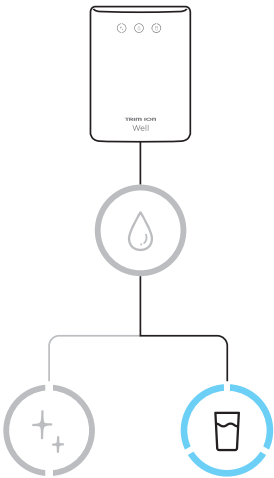

家庭用管理医療機器で作られる水であり、
胃腸症状の改善効果が認められています。

胃腸の働きを
助けお通じを
よくします



胃もたれや胃の
不快感を
和らげます



さらに浄水に比べてカルシウムイオン、マグネシウムイオン、
ナトリウムイオンが約5~20%多く含まれます。

約pH9.5*
水素を含んだアルカリ性の水です



電解水素水モード




*pH値はあくまでも目安であり、地域・水質により数値に変動があります。



水は家族のカラダになるもの

浄水

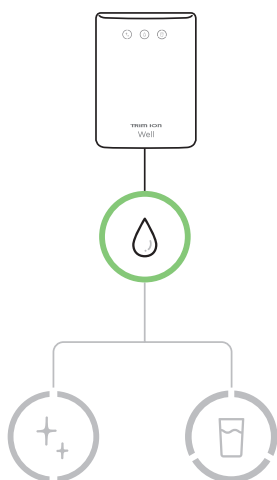

浄水器ならもちろん浄水も毎日使えます。
赤ちゃんのミルク作りに、ペットの飲み水に。
水を選ぶことができない家族だからこそ、
やさしく、美味しいお水を。

WellならPFOS・PFOAを含む22物質を
除去しているので、浄水機能も優れています

PFOS・PFOA(ビーフォス・ビーフォア)とは

有機フッ素化合物 (PFAS) の一種で、人体や環境への悪影響が懸念されています。現在は原則として使用が禁止されていますが、かつては食品包装や日用品のコーティングなどに使用されていました。自然界や体内で分解されにくく、「永遠の化学物質 (フォーエバー・ケミカル)」とも呼ばれています。近年では水道水などから検出される事例もあり、対策が進められています。日本トリムでは、これらの物質の除去にいち早く取り組んできました。

浄水モード

電解なし




ミルクや
薬の服用など



水を変えれば、キレイも変わる

酸性水

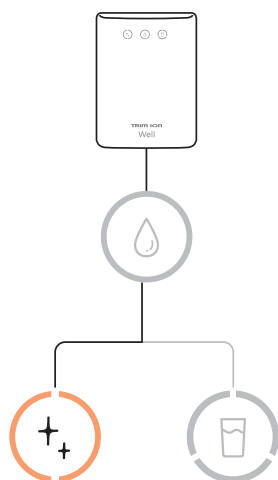

酸性水は、弱酸性で肌にやさしい水。
手洗い、洗顔、洗い物や洗濯、
暮らしの中で清潔を保ちたい場面でも
Wellが役立ちます。

そのほかこんな活用法も

- うどん・そうめん・ひやむぎの茹で水に
- 天ぷらの衣をとく水に
- ゆで卵の茹で水に
- 食器のつけ置き洗いに
- 排水溝のお手入れに

酸性水モード

レベル 1 pH 5.5~6.4*	レベル 2 pH 4.8~6.2*
洗顔用 (肌に近い弱酸性)	食器などの洗浄

*pH値はあくまでも目安であり、地域・水質により数値に変動があります。



飲むだけではもったいない
美味しい水が料理を変える





日本トリムが選ばれる3つの理由

1. 整水器シェアNo.1*



日本トリムは2023年度家庭用整水器国内市場売上金額No.1*。

多くのお客様に選んでいただいています。


※2023年度家庭用整水器国内市場 同器本体におけるメーカー出荷金額ベース シリーズ製品合算値
株式会社矢野経済研究所調べ 2025年6月現在
※本調査結果は、定性的な調査・分析手法による推計である。

2. 内部のお手入れは、器械まかせでメンテナンスフリー

日本トリム独自のシステム「ダブルオートチェンジクロスライン方式」。

器械本体が定期的に電極と水路を切り換えるから

電極にカルシウムなどが付着しにくい構造です。

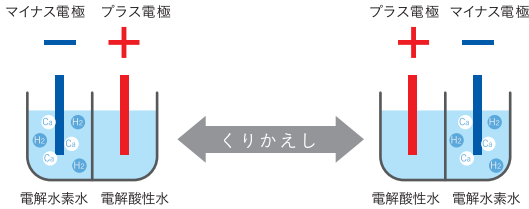

独自技術で
長期間安定した
電気分解が可能

3. 購入後も安心！ 徹底したアフターサポート



28拠点約660名の
専門スタッフ



自社コールセンターで
ご購入後のフォロー



最新情報やレシピなど
情報誌の送付


家計にも環境にもWellな理由

カラダによくて、美味しいだけではない
家計と環境にもやさしいから
続けられる、続けたいくなる

1ℓなんと7円、家計にもやさしいお水です

1日16リットル
5年間使用
した場合

本体 カートリッジ 電気代 水道代

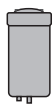  +  +  = 約**7円***
(1ℓあたり)

*本体標準価格：157,300円(税込)、専用カートリッジ：11,000円(税込)
(157,300+11,000×4本)÷(365日×5年×16ℓ)+電気代・水道代=約7円(1ℓ)
*当社試算サンプル例であり、ご使用の地域やご使用方法によって金額は前後します。



一般的なミネラルウォーター
1ℓあたり 約**100円**




一般的なウォーターサーバー
1ℓあたり 約**156円***

*ウォーターサーバーを1か月2ボトル使用した場合 ウォーターボトル1本(12ℓ)1,320円(税込)、
サーバーレンタル料等(1か月)1,100円(税込) (1,320円×2本+1,100円)÷24ℓ=約156円(1ℓ)

ゴミが減らせる。環境にも暮らしにも気づかいを

カートリッジ1本で2ℓのペットボトル **2,500本*** 削減

カートリッジ1本
浄水能力 約12か月

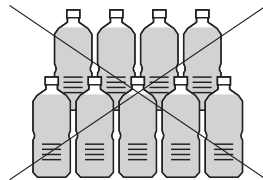


 さらに使用済みカートリッジは無償で回収、リサイクルに


*カートリッジろ過能力6,000ℓ/本、電解水素水の取水比率 約83.3% 6,000ℓ×83.3%÷2ℓ=約2,500本

お客様アンケートから

Q ご利用満足度は？

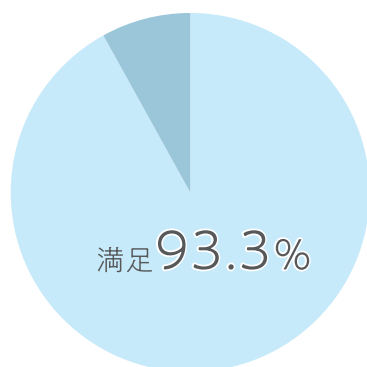

Q 整水器を購入した一番の決め手を教えてください

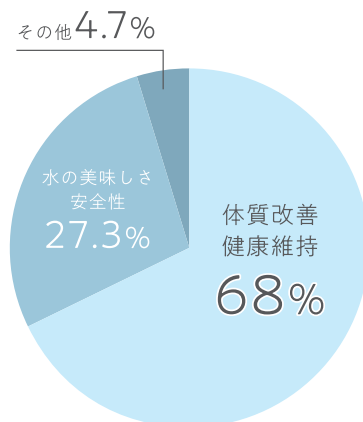

トリムイオンお客様満足度調査
(2023年9月~2024年8月) 調査人数 10,251人

お客様の声

水道水に対する安全基準や配管の劣化などが気になっていましたが、その悩みから解放されて、料理や飲み水にも気兼ねなくたくさん使えるようになりました。(40代女性)

ペットボトルの水をわざわざ購入する必要がなくなり、ゴミも出ないのでとても便利です。お手入れも簡単で、美味しいお水が毎日飲めるのが嬉しいです。酸性水を洗顔に使うのも気に入っています。(40代女性)

息子が生まれ、水は毎日口にするものだからと思い購入しました。旅行先や飲食店で水を飲んだときに、うちの水ってクセがなくて美味しいんだと感じています。(30代女性)

水の量を気にすることなく、安くて美味しいお水をたっぷり飲めるのが嬉しいです。カートリッジの交換も簡単でした。(50代女性)

*個人の感想であり、効果を保証するものではありません。

初めてでも安心。取り付けサポートが充実


1. 製品設置は簡単

ご自身で簡単に取り付けいただけます。ただし、取り付けができない水栓もございます。その際は簡易工事が必要になりますので、当社にご相談ください。

☎ 0120-390-460(平日9:00~18:00)



簡易工事について
シャワー水栓にも対応できます。

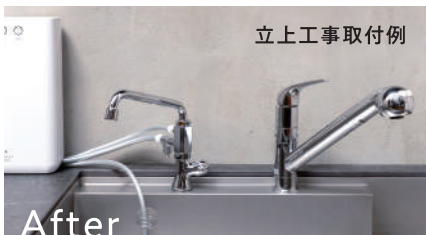

2. 動画でわかりやすく解説


https://www.nihon-trim.co.jp/product/movie_well

取り付け動画は
こちら



3. 取り付け方法の疑問や工事が必要な 場合のやりとりなどは公式LINEで 気軽かつスピーディーに対応

取付相談などLINEで
スタッフに問い合わせ
平日9:00~18:00
担当者より回答いたします

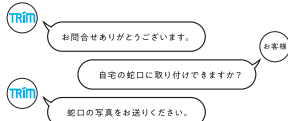

友だち追加はこちら




主な仕様（浄水カートリッジ）

PREMIUM

プレミアムマイクロカーボン MMαカートリッジ

プレミアムマイクロカーボンMMαカートリッジは非常に細かい活性炭（マイクロカーボン）で構成されており、溶解物質の吸着が速く、濁りなどの微粒子までしっかり取り除きます。

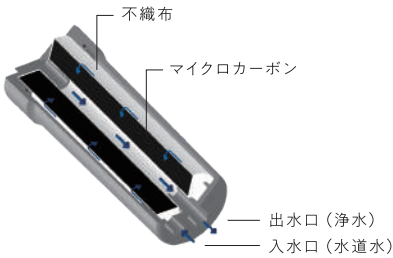

材料の種類	ABS樹脂
ろ材の種類	不織布・活性炭・ポリエチレン・ポリプロピレン
ろ過流量(動水圧100kPaのとき)	3.0リットル／分
使用可能な最小動水圧	50kPa
浄水カートリッジの交換時期の目安	約12か月（1日約16リットルの使用で交換時期をお知らせ）※1 総使用量は約6,000リットル お知らせ方法は取扱説明書『カートリッジ交換ランプについて』を参照
使用上の注意	取扱説明書『安全上のご注意・大事なお知らせ』を参照
使用水温	35℃未満

浄水能力		ろ過水量		試験規格	
除去対象物質	① 遊離残留塩素	(総ろ過水量	6,000リットル	除去率80%	JIS S 3201試験結果)
	② 濁り	(総ろ過水量	6,000リットル	ろ過流量の50%	JIS S 3201試験結果)
	③ クロロホルム	(総ろ過水量	6,000リットル	除去率80%	JIS S 3201試験結果)
	④ ブロモジクロロメタン	(総ろ過水量	6,000リットル	除去率80%	JIS S 3201試験結果)
	⑤ ジブロモクロロメタン	(総ろ過水量	6,000リットル	除去率80%	JIS S 3201試験結果)
	⑥ ブロモホルム	(総ろ過水量	6,000リットル	除去率80%	JIS S 3201試験結果)
	⑦ テトラクロロエチレン	(総ろ過水量	6,000リットル	除去率80%	JIS S 3201試験結果)
	⑧ トリクロロエチレン	(総ろ過水量	6,000リットル	除去率80%	JIS S 3201試験結果)
	⑨ 総トリハロメタン※2	(総ろ過水量	6,000リットル	除去率80%	JIS S 3201試験結果)
	⑩ CAT(農薬)※3	(総ろ過水量	6,000リットル	除去率80%	JIS S 3201試験結果)
	⑪ 2-MIB(カビ臭)※4	(総ろ過水量	6,000リットル	除去率80%	JIS S 3201試験結果)
	⑫ 溶解性鉛	(総ろ過水量	6,000リットル	除去率80%	JIS S 3201試験結果)
	⑬ 1,2-DCE※5	(総ろ過水量	6,000リットル	除去率80%	JIS S 3201試験結果)
	⑭ ベンゼン	(総ろ過水量	6,000リットル	除去率80%	JIS S 3201試験結果)
	⑮ ジェオスミン(カビ臭)	(総ろ過水量	6,000リットル	除去率80%	JIS S 3201試験結果)
	⑯ 陰イオン界面活性剤	(総ろ過水量	6,000リットル	除去率80%	JIS S 3201試験結果)
	⑰ フェノール類	(総ろ過水量	6,000リットル	除去率80%	JIS S 3201試験結果)
	⑱ PFOS及びPFOA※6,7	(総ろ過水量	6,000リットル	除去率80%	JWPAS B.210 試験結果)
	⑲ 鉄(溶解性)※7	(除去率80%	JWPAS B.210	試験結果)	
	⑳ 鉄(微粒子状)※7	(除去率80%	JWPAS B.210	試験結果)	
㉑ 溶解性マンガン※7	(除去率80%	JWPAS B.210	試験結果)		
㉒ アルミニウム (中性)※7	(除去率80%	JWPAS B.210	試験結果)		

※1 使用水量・水質・水圧によって交換時期が大幅に短くなることがあります。
また、総使用量6,000リットル未満の場合でも12か月を経過すると交換をお知らせします。

※2 クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルムの 4 物質の総称です。

※3 2-クロロ-4,6-ビスエチルアミノ-1,3,5-トリアジンの別名で、農薬の一種です。

※4 2-メチルイソボルネオールの略称で、水道水のカビ臭原因物質の一つです。

※5 シス-1,2-ジクロロエチレンおよびトランス-1,2-ジクロロエチレンの略称です。

※6 有機フッ素化合物 (PFAS) の一種です。

※7 浄水器協会（JWPA）で定められた規格基準（JWPAS B 基準）による物質です。

※除去性能については JIS S 3201(家庭用浄水器試験規格) ならびに JWPAS B(浄水器協会自主規格) に規定されている試験方法により、物質の浄水能力を試験・確認しております。

主な仕様



電解水素水整水器

TRIM ION
Well


取付工事費別 標準価格 ￥157,300（税込）

クラス	管理医療機器
販売名	トリムイオン Well
医療機器製造販売認証番号	307AGBZX00027000
定格電圧	AC100 V
定格周波数	50-60 Hz
定格電流	AC3.4 A
待機電力	約0.6 W
消費電力	約180 W
隔膜電解槽電解電圧	70V(max.)
隔膜電解槽	2槽(4セル)

電極(枚数)	プラチナコーティング電極(3枚)
電極寿命	電解時間として約1000時間 (使用量・水質等の使用条件によって異なります)
取水量 (動水圧100kPaのとき)	電解水素水 2.5 リットル/分 酸性水 2.5 リットル/分 浄水 3.0 リットル/分
取水排水比率 (動水圧 100kPa のとき)	約 5 : 1
使用可能配管水圧 (静水圧)	50kPa(最低動作水圧) ～700kPa
使用可能水温	35℃未満

本体重量	約2.4 kg
電源コード長	約1.5 m
本体寸法	190 (W) X 300 (H) x 120 (D) mm
最大耐水量	約3.5リットル/分
電解槽洗浄方式	ダブル・オートチェンジ・クロスライン方式
電源回路	スイッチング・レギュレーター制御方式
本体保護機能	分岐水検定流量弁 分岐水検警告弁（過大水圧防止） 定電流制御回路 過熱防止装置 ヒューズ（基板内蔵） 6.3 A

本製品は改良のため予告なく仕様変更することがありますので、製品と一部差異が発生する場合があります。ご了承ください。

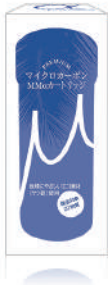

PREMIUM
プレミアム
マイクロカーボン
MMαカートリッジ
¥11,000(税込)



〈付属品〉
●水栓蛇口用分岐水栓・各種アダプター付き
7種類のアダプターをセットしていますので、一般的な蛇口であれば簡単に取り付けることができます。
●入出水ホース(ツインタイプ)1.5m
●排水ホース(シングルタイプ)1.5m
●吸盤 ●ホース固定バンド
●pH測定キット

⚠ 安全上のご注意 ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

●このカタログに記載の商品は国内一般家庭用です。●飲用に適合した水(水道水など)以外には使用しないでください。●35℃を超えるお湯を本体側に通さないでください。●pHの測定は定期的に行い、pH10以上の水は直接飲用しないでください。●次のような水は飲用しないでください。
(1)酸性水、(2)排水ホースから出る水、(3)pH測定液が入った水 ●医薬品を電解水素水で併飲しないでください。●次の方は電解水素水を飲む前に医師に相談してください。(1)医師の治療を受けている方、(2)腎臓に障害がある方、(3)身体に異常を感じている方 ●電解水素水を飲用して身体に異常を感じたとき、または、飲用し続けても症状が改善が見られないときは飲用を中止し、医師に相談してください。●次の方は酸性水を使用する前に医師に相談してください。(1)肌の弱い方、(2)アレルギー体質の方 ●酸性水を使用して肌に異常を感じたときは、速やかに使用を中止し、医師に相談してください。●飲用にはpH9.5前後 (pH9.0～pH10未満) をおすすめしますが、初めて飲用する方は水素水レベル1で少量から飲用してください。●電解水素水は、1日当たり500～1000ミリリットルを目安に飲用してください。●生成水は生成後なるべく早く使用してください。また、電解水素水/浄水を保存する場合は、清潔なペットボトルなどの密閉容器に入れ冷蔵庫で保存し、2日以内に飲用してください。

Wellをおすすめしたいポイント

① 初めての整水器に最適！圧倒的コンパクト

設置面積が小さく、場所をとりません。

小さなキッチンや一人暮らしにもぴったりです。

② 溶け込むデザイン

空間になじむホワイトカラーとやわらかなフォルム。

どんなキッチンにも自然になじみます。

③ 使いやすさと操作性をさらに追求

ボタンはシンプルで押しやすく、直感的に操作可能。

お手入れも簡単で、日々の使いやすさを重視しました。

メンテナンスフリーでご使用いただけるなど、

便利な機能はそのままに、使いやすさと操作性を追求しました。




このリーフレットは原寸サイズです。

こちらを奥行きとして

ご家庭における設置スペースを

ご確認くださいませ。

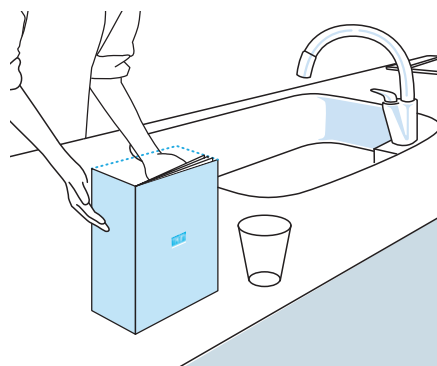



☎ 0120-390-460 受付時間 9:00～18:00 (土・日・祝を除く)

株式会社日本トリム

東証プライム市場：証券コード6788

本社：〒530-0001 大阪市北区梅田2-2-22 ハービスENTオフィスタワー 22F
支社：札幌・仙台・東京・名古屋・広島・高知・福岡 その他営業所20拠点

<https://www.nihon-trim.co.jp/>